



TUOREN Medical
Каталог продукции



TUOREN

Ларингиальная маска




Простота установки и фиксации
Изгиб Blockbuster™ предназначен для быстрого введения.



Герметичность и биосовместимость
Давление уплотнения может достигать 50 см рт.ст.20.
Хорошая биосовместимость с силиконовым материалом.



Четырехходовой разъем позволяет легко закрепить его после установки.

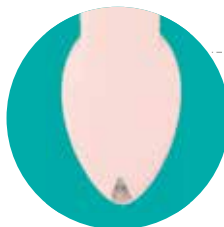

Доступ к желудку
Канал доступа к желудку предназначен для снижения риска аспирации. Конструкции входного и выходного отверстий удобны для введения желудочного зонда.

Ларингиальная маска Blockbuster™

- Короткая трубка для дыхательных путей с углом наклона более 95 градусов соответствует изгибу ротоглотки, легко вводится.
- Канал доступа к желудку предназначен для управления желудочным содержимым и снижения риска аспирации.
- Добавлена возможность интубации, и успешность замены эндотрахеальной трубки составляет более 95%.
- Направляющее устройство позволяет трубке ЕТ направляться к голосовой щели.
- Оснащен специальной эндотрахеальной трубкой и направляющей для обмена.
- Высокая гемодинамическая стабильность.
- Устройство для сбора мокроты может собирать небольшое количество мокроты.



Blockbuster™	
РАЗМЕРЫ	CAT. NO
1.0	LMA410
1.5	LMA415
2.0	LMA420
2.5	LMA425
3.0	LMA430
4.0	LMA440
5.0	LMA450

Гортанная маска Blockbuster™



Blockbuster™	
РАЗМЕРЫ	CAT. NO
3.0&6.5	BLMET3065
4.0&7.0	BLMET4070
5.0&7.5	BLMET5075



Ларингиальная маска

С не надувной манжетой

- Нет необходимости надувать, быстрая установка.
- Уникальная конструкция отверстия для самостоятельного дыхания в манжете позволяет изменять давление в манжете в соответствии с давлением вентиляции, уменьшая повреждение дыхательных путей горла локальным постоянным давлением.
- Предварительная форма: В соответствии с физиологической структурой горла, она предназначена для легкого размещения, предотвращения смещения, низкого повреждения и хорошей герметизации манжеты.
- Замена трубки ЕТ: Направляющее устройство позволяет трубке ЕТ направляться к голосовой щели.

Не надувной	
РАЗМЕРЫ	CAT. NO
3.0	NILMA430
4.0	NILMA440
5.0	NILMA450



Стандартного типа

- Миорелаксант не требуется.
- Уменьшите количество осложнений в периоперационном периоде.
- Силиконовый материал обладает хорошей биосовместимостью и защищает дыхательные пути.
- Решетки с отверстиями, разработанные на случай плохой вентиляции, вызванной складыванием надгортанника.
- Хорошая податливость и специальный производственный процесс делают его мягким, гладким и гибким.
- Хорошая герметичность.

Одноразовые	
РАЗМЕРЫ	CAT. NO
1.0	LMA110
1.5	LMA115
2.0	LMA120
2.5	LMA125
3.0	LMA130
4.0	LMA140
5.0	LMA150

Многоразовые	
РАЗМЕРЫ	CAT. NO
1.0	MAR010
1.5	MAR015
2.0	MAR020
2.5	MAR025
3.0	MAR030
4.0	MAR040
5.0	MAR050



Армированного типа

- Усиленный трубчатый корпус с характеристиками гибкости и защиты от перегибов.
- Устраните риск закупорки дыхательных путей.
- Уменьшите количество осложнений в периоперационном периоде.
- Силиконовый материал обладает хорошей биосовместимостью и защищает дыхательные пути.
- Хорошая герметичность.

Усиленные			
РАЗМЕРЫ	CAT. NO	РАЗМЕРЫ	CAT. NO
1.0	LMA210	3.0	LMA230
1.5	LMA215	4.0	LMA240
2.0	LMA220	5.0	LMA250
2.5	LMA225		



● Двухканальная

- Независимая дренажная полость пищевода для снижения риска аспирации.
- Усиленный трубчатый корпус с хорошей гибкостью и защитой от перегибов.
- Фиксатор прикуса предотвращает прокусывание трубки и обеспечивает вентиляцию дыхательных путей.
- Силиконовый материал обладает хорошей биосовместимостью и защищает дыхательные пути.
- Хорошая герметичность и конструкция с двойными манжетами, давление уплотнения до 40 см рт.ст.20.

Двухканальные	
РАЗМЕРЫ	CAT. NO
1.0	LMA310
1.5	LMA315
2.0	LMA320
2.5	LMA325
3.0	LMA330
4.0	LMA340
5.0	LMA350

Многоразовые	
РАЗМЕРЫ	CAT. NO
1.0	MAR310
1.5	MAR315
2.0	MAR320
2.5	MAR325
3.0	MAR330
4.0	MAR340
5.0	MAR350



● ЛОР-тип

- Вентиляционная трубка может гибко поворачиваться на 360°, не мешает хирургической операции.
- Его дренаж из пищевода может предотвратить метеоризм и аспирацию.
- Пластичность в соответствии с физиологической структурой человека, ее легко вставлять и фиксировать, а повреждения невелики.

ENT	
Размеры	CAT. NO
3.0	ELMA330
4.0	ELMA340
5.0	ELMA350



● Тип ПВХ

Обычные			
РАЗМЕРЫ	CAT. NO	РАЗМЕРЫ	CAT. NO
1.0	LMA310	3.0	LMA3130
1.5	LMA315	4.0	LMA3140
2.0	LMA320	5.0	LMA3150
2.5	LMA325		

Двухканальные			
РАЗМЕРЫ	CAT. NO	РАЗМЕРЫ	CAT. NO
1.0	LMA310	3.0	LMA3330
1.5	LMA315	4.0	LMA3340
2.0	LMA320	5.0	LMA3350
2.5	LMA325		





TOO «Galamat Integra»

📍 010000, Республика Казахстан, г. Астана,
проспект Мангилик Ел, здание 20/2

☎ +7 (7172) 308 727
+7 (701) 883 0215
7172 406 835

✉ info@galamat.com

TUOREN MEDICAL



☎ +86-373-8605444

✉ info@bjtuoren.com; info@etuoren.com

📍 Tuoren Industrial Zone, Changyuan, Henan, China

🌐 www.tuoren.com